

## Produkt

### Thema/ Produktbeschreibung

# Würfel-Pessar Tandem

Durch die Evolution des aufrechten Gangs ist der Beckenboden des Menschen den Wirkungen der Schwerkraft ausgesetzt. Besonders betroffen davon ist der Beckenboden der Frau. Deshalb zählt die Genitalsenkung zu den häufigsten Krankheitsbildern in der Frauenheilkunde. Die Wahrscheinlichkeit, an einem so genannten Genitaldeszensus zu erkranken, steigt mit zunehmendem Lebensalter. Faktoren wie Mangel an weiblichen Hormonen, Adipositas, schweres körperliches Arbeiten, Ernährungsgewohnheiten, genetisch bedingte Gewebsschwäche erhöhen das Risiko.



Das **medesign Würfel-Pessar Tandem** eignet sich zur Behandlung von extremer Scheiden- und Gebärmutterensenkung. Es besteht aus zwei aneinander gekoppelten Würfelpessaren. Ähnlich wie beim Würfelpessar bewirken die konkaven Flächen die gute Haftung. Das **medesign Würfel-Pessar Tandem** kann auch bei Streßinkontinenz nützlich sein. Dann übernimmt der untere Würfel die Stützfunktion der Harnröhre und der obere Würfel garantiert die Haftung. Durch die Löcher im Silikon wird das Vakuum reduziert, wodurch eine leichtere Entfernung des medesign Würfel-Pessars ermöglicht wird.

### Anwendung

**medesign Tandempessare** werden morgens von der Patientin selbst eingelegt und abends wieder entfernt. Der im Würfelpessar sicher verankerte Rückholfaden erleichtert die Entfernung. Die im Verhältnis zu Ringpessaren kleinen Würfel können leicht eingeführt und mit Hilfe des Zugfadens wieder entfernt werden. Die nächtliche Entlastung der Schleimhaut und des Beckengewebes stellt einen wesentlichen Vorteil gegenüber allen anderen Pessaren dar.

### Hinweis

siehe Gebrauchsanweisung

### Zutaten/Inhaltsstoffe

Material: medizinisch Silikon

### Klassifizierung



Medizinprodukt Klasse IIb, Behandlungseinheit mit Medizinprodukt Klasse IIa

### Inhalt


- 1 Pessar (Silikon) mit Gebrauchsanweisung
- 1 Ladysoft Gleitgel, 30ml, mit Gebrauchsanweisung

### Produktdaten

#### Faden an kleinerem Pessar

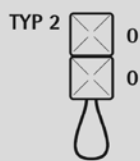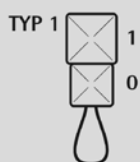

#### Faden an größerem Pessar

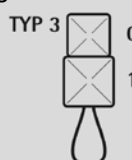

Artikelbezeichnung	Größe	Artikelnummer	EAN Code
Würfel-Pessar Tandem	1-0 / 29-25 mm	MED1001071	4250201201881
Würfel-Pessar Tandem	2-1 / 32-29 mm	MED1001070	4250201201898
Würfel-Pessar Tandem	3-2 / 37-32 mm	MED1001069	4250201201904
Würfel-Pessar Tandem	4-3 / 41-37 mm	MED1001068	4250201201911
Würfel-Pessar Tandem	5-4 / 45-41 mm	MED1001067	4250201201928
Würfel-Pessar Tandem	6-5 / 55-45 mm	MED1001094	4250201201935
Würfel-Pessar Tandem	0-0 / 25-25 mm	MED1001634	4250201207227
Würfel-Pessar Tandem	1-1 / 29-29 mm	MED1001635	4250201207234
Würfel-Pessar Tandem	2-2 / 32-32 mm	MED1001636	4250201207241
Würfel-Pessar Tandem	3-3 / 37-37 mm	MED1001637	4250201207258
Würfel-Pessar Tandem	4-4 / 41-41 mm	MED1001638	4250201207265
Würfel-Pessar Tandem	5-5 / 45-45 mm	MED1001639	4250201207272
Würfel-Pessar Tandem	0-1 / 25-29 mm	MED1001654	4250201207401
Würfel-Pessar Tandem	1-2 / 29-32 mm	MED1001655	4250201207418
Würfel-Pessar Tandem	2-3 / 32-37 mm	MED1001656	4250201207425
Würfel-Pessar Tandem	3-4 / 37-41 mm	MED1001657	4250201207432
Würfel-Pessar Tandem	4-5 / 41-45 mm	MED1001658	4250201207449
Würfel-Pessar Tandem	5-6 / 45-55 mm	MED1001659	4250201207456

Alle Angaben unter Vorbehalt. Originale können produktionsbedingt von den Abbildungen abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

L:\Werbung\Marketing &  
Sales\Produktbeschreibungen\_freigegeben\wuerfelpessar\_tandem.doc

Stand 26.08.2011  
Freigegeben am:

**M E D E S I G N**

medesign I. C. GmbH Dietranszeller Str. 6 D-83623 Dietranszell  
Phone: ++49-8027-90738-0 Fax: ++49-8027-90738-27  
email: info@medesign.de internet: [www.medesign.de](http://www.medesign.de)